

毎日の介護を笑顔でつつむ



自動ラップ式トイレ

wrappon ラップポン

- ラップポン・プリート (S)
- ラップポン・ブリオ (S)

CARE

介護の負担を減らし、 精神的にゆとりのある介護生活へ

食事・排泄・着替え・入浴などの生活サイクルにおいて、1日のなかでもっとも回数が多いのが「排泄」です。排泄には個人差がありますが、1日に6～8回、多い人では10回以上の排泄をおこなうといわれています。高齢者のトイレ介助が、介護する側にとって大きな負担となり、問題となっています。ラップポンはそのトイレ介助の負担を軽減します。

高齢者の介護で 苦勞すること




※出典:厚生労働省2018年3月7日更新

ラップポンでどんなトイレ?

“ラップポン”とは、日本セイフティーが独自に開発した「水を使わず、臭いも漏らさず、排泄物等を密封して微生物(細菌)も遮断する新しいラップシステム」のことです。このシステムを搭載したトイレは排泄物とその都度ラップ(個包装)するため、臭いや微生物(細菌)を密封。感染症の予防にも利用されています。また、“ラップポン”で排泄物を密封すれば、後処理の手間が軽減されます。

内蔵されている
自動ラップ式排泄処理ユニット

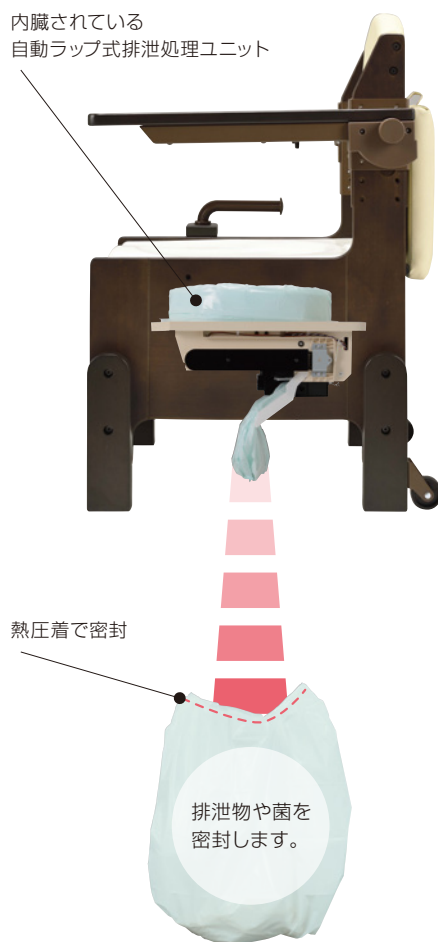

自動ラップ処理の仕組み



ラップオンだからできること




介護・掃除の手間の軽減

自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載し、毎回個包装にしているため、バケツが必要ありません。
排泄介護で負担の大きいバケツ洗浄が不要なため介助者の負担を軽減します。




衛生的で臭わない

特殊フィルムで臭いも排泄物も熱圧着により密封するため、室内への臭いの拡散を防止します。

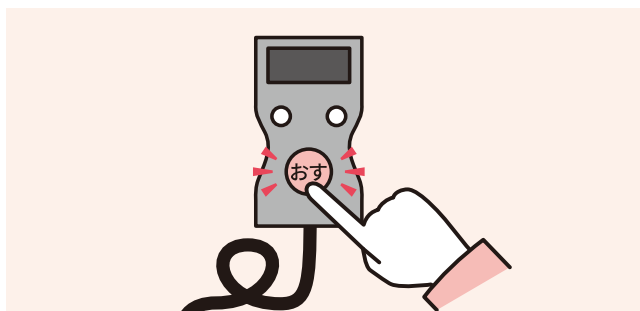

簡単操作で自立生活の支援

凝固剤を入れて、ボタンをワンプッシュするだけの操作で、誰でも簡単に使え、自立生活支援に役立ちます。

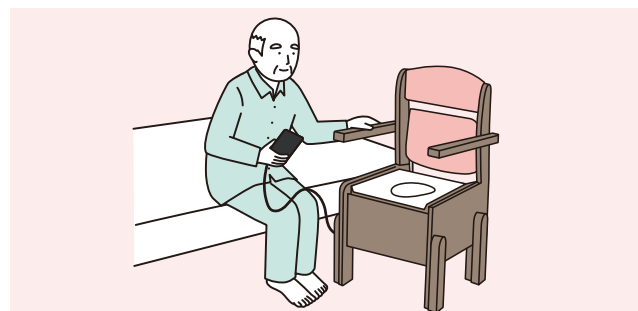

利用者の心の負担軽減


自分の排泄物を見られたくないという気持ちや掃除をしてもらう事への遠慮は必要ありません。
自尊心をもった排泄が可能です。

使い方は簡単!



1. 専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用します。

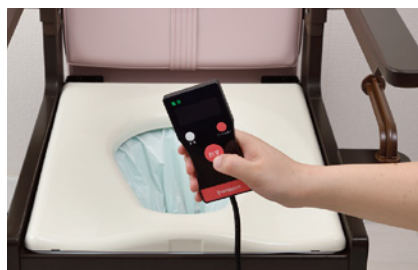

2. 作動ボタンを押す

排泄後、作動ボタンを押すと自動で処理を開始します。処理終了まで約90秒かかり、リモコンにカウントダウン方式で表示されます。



3. ラップ済み袋を取り出す


終了音が鳴るとラップ処理完了です。
トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出してください。

wrappon・PULITO(S)

介護シリーズのハイエンドモデルが
新しくなって登場!!



ラップボン・プリート(S)の
紹介動画はコチラ

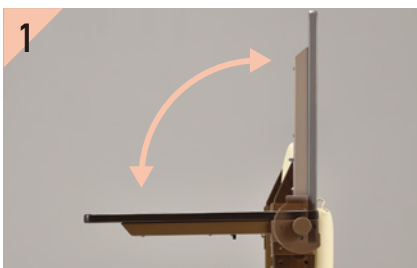

1 跳ね上げ式の肘

ご使用時はロックされるため安心です。
レバー操作で簡単に解除が可能です。



2 肘掛け3段階調節

使う方の体格や症状に合わせて18・21・
24cmの高さ調節が可能です。



3 3段階調節の脚

座面の高さが3cm毎に3段階の調節が
できます。(40・43・46cm)



4 移動もラクラク

キャスターがついているのでラクに移動が
できます。



5 緊急袋付き

停電時や故障時など、もしもの時に
使える緊急袋付き。



6 ペーパーホルダー

標準装備のペーパーホルダーは左右どちら
にも取り付け可能です。

ラップボン・プリート(S)

| 普通便座

149,600 円(税込)

| やわらか便座

155,100 円(税込)

| 暖房便座

166,100 円(税込)



最新の自動ラップ式排泄処理ユニットを搭載したラップオンベシックモデルです。



ラップオン・ブリオ(S)の紹介動画はコチラ



1 移乗に便利

ベッドからの移乗がスムーズに行えるように、左右の肘掛がネジで取り外せます。



2 肘掛け2段階調節

使う方の体格や症状に合わせて高さの調節ができます。
(21・24cm)



3 3段階調節の脚

体型やお好みに合わせて座面の高さが3cm毎に3段階の調節ができます。
(40・43・46cm)

ラップオン・ブリオ(S)

| 普通便座

106,700 円(込税)

| やわらか便座

112,200 円(込税)

| 暖房便座

123,200 円(込税)



user voice

ご使用者様の声の一部をご紹介します。

user voice 01

他のポータブルトイレにした時の労力を考えると、、、

消耗品のコストはかかりますが、他のポータブルトイレに替えた時の労力を考えると大変ですね。1回使用しては洗って、乾かして、処理をしてって考えると、、、。夜中も2〜3回はトイレを使うので、その都度の洗浄は大変ですね。母(ご利用者)の自立にもすごくいいです。自分で全部処理できるので、一番いいかなと思います。



愛知県尾張旭市
夏目様 ご使用者:母(70代)

user voice 02

感染症を広げない事において
すごく長けている

今まではポータブルトイレの中に入っているバケツを取り出して外に持ち出してから消毒だったり、洗浄をしていましたので手間だったり、便が空気に触れたり、利用者さんの目に触れてしまったり。その部分がすごく気になっていました。ラップポンは(その部分が気にならないので)すごくいいと思う。排泄物が密閉した状態で出てくる所は、感染予防に便利ですね。清潔を保持するという所と、感染症を広げない事においてすごく長けていると思います。



医療法人社団
仁鷹会
介護老人保健施設
陽だまり
介護職 堀口様

user voice 03

思ってた排泄介護の
イメージと違いました。

自分が簡易トイレに抱いていたイメージとはまるで違いました。部屋の中に臭いが広がらないので、母(使用者)も満足してますね。

静岡県浜松市 鈴木様 ご使用者:母(70歳代)

user voice 04

臭いのある生活が当たり前
になっていたと思います

他のトイレを使っていたと思うと臭いもするし、私(介護者)の負担も大きいですよね。ラップポんがなかったら、臭いのある生活が当たり前になっていたと思います。

兵庫県西宮市 山本様 ご使用者:母(80歳代)

user voice 05

臭いもなく、誰かの手をわずらわせる
事もないので、いいなと思ってます。

人によってはヘルパーさんに排泄物の処理をさせたくないと思う人もいて、ヘルパーさんが来る前に自分でバケツ洗浄をする人もいます。やっぱり汚れが付いていて臭いもするんですが、それでもやってもらうのは抵抗があるみたいです。臭いに関しては、やっぱり通常のポータブルトイレは、こびり付く臭いみたいなものがあるんですが、ラップポンは全然臭いませぬ。



光ケア居宅介護支援事業
ケアマネージャー 山脇様

● ラップオン・プリート(S)

		普通便座	やわらか便座	暖房便座
ベージュ	品番	PLSEN12BJH	PLSES12BJH	PLSEW12BJH
	JANコード	4589922490794	4589922490824	4589922490985
ダークブラウン	品番	PLSEN12DJH	PLSES12DJH	PLSEW12DJH
	JANコード	4589922490800	4589922490831	4589922491005
ピンク	品番	PLSEN12PJH	PLSES12PJH	PLSEW12PJH
	JANコード	4589922490817	4589922490848	4589922491012
価格		149,600円(税込)	155,100円(税込)	166,100円(税込)
TAISコード		00942-000019	00942-000020	00942-000021
寸法	本体…幅542mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm 座面高…400、430、460mm 肘高(便座面から)…180、210、240mm 座幅…420mm			
質量	本体約27kg			
材質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便座…ポリプロピレン樹脂 やわらか便座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂 暖房便座…ABS樹脂			
消費電力	動作時75W、待機時5W以下			
電源	AC100V±10V			



● ラップオン・ブリオ(S)

		普通便座	やわらか便座	暖房便座
品番		BRSE1003JH	BRSE1002JH	BRSE1004JH
JANコード		4589922490732	4589922490749	4589922490978
価格		106,700円(税込)	112,200円(税込)	123,200円(税込)
TAISコード		00942-000017	00942-000018	00942-000022
寸法	本体…幅480mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm 座面高…400、430、460mm 肘高(便座面から)…210、240mm 座幅…420mm			
質量	本体約21kg			
材質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便座…ポリプロピレン樹脂 やわらか便座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂 暖房便座…ABS樹脂			
消費電力	動作時75W、待機時5W以下			
電源	AC100V±10V			



ラップオンのご使用には別途消耗品の購入が必要です。(消耗品は本体に付属していません)

消耗品

● 専用凝固剤カタメルサーT3

品番	COC0T3P1J
JANコード	4589922490336
容量	6ℓ(通常使用で約60回分)
価格	1,210円(税込)
材質	再生パルプ



カタメルサーT3



フィルムカセットタイプ3

● フィルムカセットタイプ3

品番	C0F1C360J
JANコード	4589922490329
容量	約60回分
価格	2,420円(税込)
材質	ポリエチレンフィルム

● フィルムカセットBOSタイプ

品番	C0F1CB50J
JANコード	4589922490572
容量	約50回分
価格	4,400円(税込)
材質	ポリエチレン ※防臭フィルム(BOSフィルム)

※ラップオン・エブリ、エールにはご使用できません。

※ラップオンの使用には、必ず消耗品が必要となります。

ラップオン・プリート(S) / ラップオン・ブリオ(S) 共通消耗部材

下記の部品は、ご利用状況及びご利用回数により、交換が必要になる場合があります。

1. 圧着ゴム交換: 3,179円(税込) 2. ヒーター交換: 7,568円(税込) 3. 圧着ゴム/ヒーターセット交換: 8,844円(税込)

オプション

ハンディーバッテリー

品番	BALPHB01JH	価格	28,600円(税込)	電池容量	6900mAh
JANコード	4589922490596	本体質量	650g	出力電圧	14.4V
USB出力	DC5V Max 2A	LED残量表示	5段階	適応規格	PSE、CE対応
充電電池	リチウムイオンバッテリー	寸法	幅86mm、高さ162mm、厚み30mm		
充電時間	約4時間※満充電での使用可能回数：約90回(連続使用)				



緊急袋

品番	C0EB0001J
JANコード	4589922490886
容量	2枚入り
価格	396円(税込)
材質	袋の大きさ(約):幅550、高さ470mm 吸収シート(約):幅300、高さ500mm



対応表

		ラップオン・プリント(S)	ラップオン・ブリオ(S)
機能	肘の跳ね上げ	○	—
	肘掛の取外し	○	○
	肘掛高さ調整	○	○
	座面高さ調整	○	○
	キャスター	○	—
	普通便座	○	○
	やわらか便座	○	○
	暖房便座※2	○	○
	ペーパーホルダー	○	—
オプション	ハンディーバッテリー	○	○
	緊急袋※1	○	○

※1 ラップオン・プリント(S)には緊急袋が標準装備されています。 ※2 暖房便座は2022年10月発売予定です。

※ラップオン・ブリオ(S)、プリント(S)は購入時のタイプにより普通便座・やわらか便座・暖房便座のいずれかが装備されています。また、追加購入も可能です。

ラップオン紹介動画

ラップオン・プリント(S)のご紹介



ラップオン・ブリオ(S)のご紹介



お問い合わせ先

販売店

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.

ラップオン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail: wrappon@nihonsafety.com URL: https://www.wrappon.com

ラップオン
セイフティーコール  **0120-208-718**
ニ オ フ ナ イ フ

受付時間：月～金 9:00～17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます。
いただくことがありますので、予めご了承ください。