

ラップポン・ポケット


使用方法

1 上フタを開けて、使用したオムツをフィルム内に捨てます。

上の方にあると圧着時にオムツを挟んでしまうことがありますので、下記の点線より奥まで押し込んでください。




…丸めたオムツ

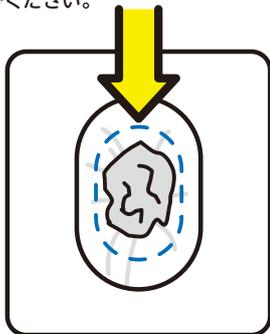

中央の奥へ入れてね

2 上フタを閉じて、前面の「作動ボタン」を約1秒押ししてください。

ラップ動作がはじまりますので、上フタは開けないでください。

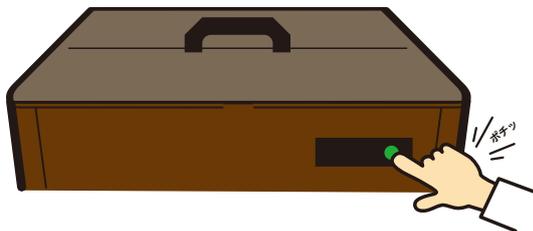

※ 作動ボタンを押して、処理が始まった状態で上フタ及び前扉を開けるとエラーとなり、処理が停止します。

3 表示画面のカウントダウンが0になると「ピッピッピッ」と音が鳴ります。ラップされたオムツは下のカゴに落ちます。



4 回収するときは前面の扉を開けてカゴを取り出してください。

※ 収納目安は大人用オムツLサイズ+尿取りパッドで約10個です。



フィルムロール交換の
動画はコチラ →



使用方法の
動画はコチラ →



● お問い合わせ先

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.
ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail: kaigo@nihonsafety.com URL: http://www.wrappon.com

ラップポン
セイフティーコール  **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます。
いただくことがありますので、予めご了承ください。

● 販売店


ラップポン・ポケット フィルムロールの交換

フィルムにSTOPマークが出たら交換してください


- 1 上フタを開けて
インサイドカバー
を取り外す。




- 2 フィルム送りボタンを押す
フィルムが20cm送り出されます。
フィルムがなくなるまで繰り返し操作をしてください。

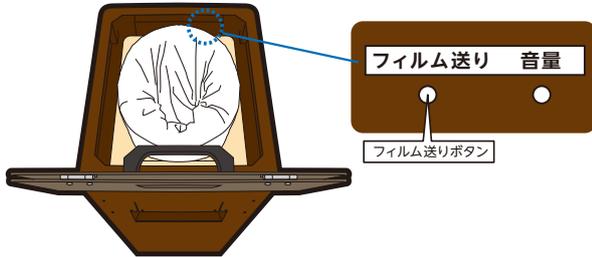

- 3 フィルムガイドを
取り外す。
フィルムガイドのツメ(2箇所)を
外して、上に抜きます。

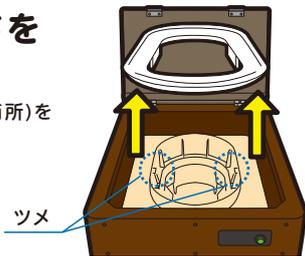

- 4 新しいフィルムロールをガイドに
沿って置く。
フィルムの位置と上下に気を
付けてください。

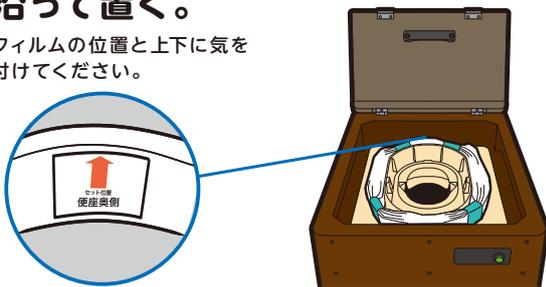

- 5 フィルムガイドを取り付ける。
フィルムガイドが「カチッ」と音がするまで押し込んでください。




- 6 フィルムロールの
結束バンドを
取り外す。

- 7 フィルムロールを
押し込む。


フィルムを外側から持ち、
フィルムガイド上端から
フィルム全体を約30cm持ち
上げます。

フィルム
ガイド上端

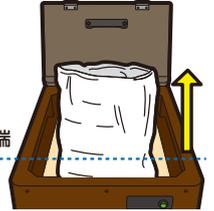


フィルムの上部をひとまとめ
につまみます。

手に持ったフィルムロールを
トイレの中に押し込みます。

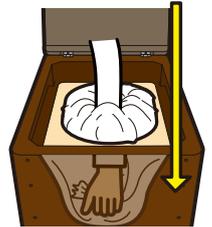


- 8 ジグリンでローラー押し込む。

天板の突起に合わせてジグリンで抵抗がなくなるまで垂直に
ローラーに押し込んでください。

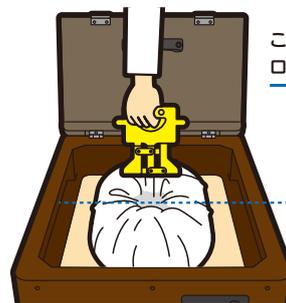

この部分のフィルムの下に
ローラーがあります。

天板の突起

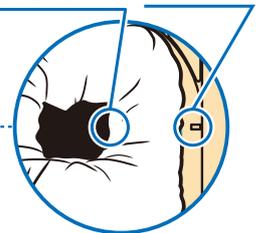

必ずフィルムが左右のローラーに挟まれていることを確認して
ください。フィルムがはずれている時は、もう一度、ジグリンを
差し込んでください。

- 9 インサイドカバーを
取り付けて、上フタを閉める。

- 10 上フタを閉めて、前面の作動ボタンを
押し、初期設定をする。

ラップ動作中は作動中ランプが緑に点滅します。
※この操作を行わないと、袋の底がラップされません。

ラップ動作が終了すると「ピピピピッ」と音が鳴ります。
リモコンの作動中ランプが消灯します。
ラップ動作が終了するまでフィルムを引っ張らないで
ください。

- 11 ラップ動作が終了したら、
切り離されたフィルムは、
下のカゴに落ちます。
フィルムロールの取り付けは完了です。